

2020

VERKAUFSHIT
DENAS PCM 6 – DER
HAUSARZT FÜR
DIE GANZE FAMILIE –
S. 12–13

WIRKE AUF DIE
FUSSSOHLE –
STEUERE
DEN GANZEN
ORGANISMUS!

DENAS-Reflexo –
externe Elektrode für
DENAS-PCM S. 14–15

**GESUNDHEIT
ALS LEBENSSTIL**

DENS-THERAPIE

In 20 Jahren wurde die DENS-Therapie auf der Ebene des Föderativdienstes für die Aufsicht im Bereich der Gesundheit und der Sozialpflege der RF anerkannt. Ungefähr 30 Doktor- und Kandidatenarbeiten wurden zum Thema der Methode verteidigt, mehr als 1.000 wissenschaftliche Arbeiten, darunter 5 Monographien und mehr als 20 methodische Empfehlungen für Ärzte geschrieben. All dies garantiert die hohe Qualität und Effizienz von DENAS-Geräten.

Die DENS-Therapie ist beliebt und die Marke ist weit über Russland hinaus bekannt. Der Grund für den Erfolg ist echte Hilfe bei der Behandlung, Krankheitsprävention, Gesundung. Die DENAS-Geräte werden in verschiedenen Städten und Ländern eingesetzt und von Tausenden von Menschen in vielen Gesundheitseinrichtungen verwendet. Gesundheit ist ein unschätzbares Geschenk, ihre Vermehrung und Stärkung ist ein edles Werk. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine feste Gesundheit!



GESUNDHEIT IST FÜR ALLE ERREICHBAR

Die Dynamische Elektrostimulation (DENS, DENS-Therapie) ist eine physiotherapeutische Methode, wobei mit Pulsstrom mit niedriger Frequenz und geringer Leistung auf bestimmte Teile der Haut zur Behandlung und Vorbeugung eingewirkt wird.

Die DENAS-Geräte sind tragbar, sie erfordern keine besonderen Bedingungen für die Realisierung der Prozeduren. Sie sind an den Hausgebrauch angepasst.

Die therapeutische Wirkung der DENS-Therapie ist erwiesen: sie lindert Schmerzen, wirkt entzündungshemmend, wirkt auf die Blutgefäße, hat Immunmodulations- und Antistresswirkung, heilt Wunden.

D – dynamische Elektroneurostimulation. Der Hauptunterschied zwischen der gegebenen Methode und anderen physiotherapeutischen Methoden ist die Abwesenheit von Sucht nach der Prozedur. Dies ist dank eines speziellen Impulses möglich, der während des Wirkens auf verschiedene Hautpartien ständig seine Form ändert. Darum verwendet man den Termin „dynamisch“, in aktuellen Lehrbüchern der Physiotherapie wird DENS biologisch kontrollierte Elektronstimulation genannt. Dank dieser dynamischen Funktion können DENAS-Geräte für lange Zyklen verwendet werden. Dies ist sehr wichtig, wenn wir über chronische Schmerzen, Rehabilitation nach einer Verletzung, Operation oder die Notwendigkeit einer dauerhaften unterstützenden Behandlung bei häuslichen Bedingungen sprechen.

E – Elektroneurostimulation. In DENAS-Geräten werden als Behandlungsfaktor kurzzeitige Niederfrequenzströme genutzt. Die Besonderheit dieser Ströme liegt darin, dass sie über die Parameter verfügen, die für den menschlichen Organismus physiologisch, „verständlich“ sind (Strom, Leistung, Stimulationsfrequenz, Pulsform). Das bedeutet, dass sie keine schädliche Wirkung haben und nicht als fremd wahrgenommen werden können. Pulsströme werden von Menschen in unterschiedlichem Alter

subjektiv gut vertragen. Die Prozeduren sind schmerzlos und komfortabel.

Pulse currents are subjectively well tolerated by people from different age groups. The procedures are painless and comfortable.

N – Neurostimulation. Der Anwendungspunkt der DENS-Methode ist die Haut, genauer gesagt bestimmte Stellen auf der Haut, die eine große Anzahl von Nervenenden enthalten. Alle unsere Organe werden durch eine spezielle Struktur des Nervensystems auf die Haut projiziert. Wenn wir auf die Nervenenden (auf die Hautrezeptoren) einwirken, beeinflussen wir die Funktion der inneren Organe. Dies ermöglicht es uns, uns von Schmerzen und Entzündungen ohne Medikamente zu befreien, Schwellungen zu reduzieren und den Gefäßtonus zu regulieren.

S – Stimulation. Unter der Stimulation (aus dem Wort „Stimulus“ - beeinflussender Faktor) wird in der Physiotherapie und Reflexologie der Fakt des Wirkens auf die Haut eines Menschen verstanden, und zwar wie immer (spezielle Nadel, Finger, Laser, Magnet, etc.). In unserem Fall führen wie eine Elektroneurostimulation durch, d.h. eine Stimulation durch elektrische Impulse, um eine heilende Wirkung zu erzielen.

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE DER DENS-THERAPIE

1. Physiologische Parameter der Wirkung. DENS hat keine Nebenwirkungen und kann keine neuen Krankheiten verursachen.
2. Absenz der Sucht des menschlichen Organismus nach der heilenden Wirkung. Dies ist ein grundlegender Vorteil gegenüber anderen Methoden der Physiotherapie, der langfristige Zyklen zulässt (z. B. Rehabilitation nach einem Herzinfarkt, eine Verletzung).
3. Breites Anwendungsspektrum mit minimaler Anzahl von Kontraindikationen.
4. Autonome Stromversorgung. Für die Prozeduren sind keine besonderen Bedingungen erforderlich.
5. Die Geräte werden sowohl in Gesundheitseinrichtungen als auch bei Hausbedingungen verwendet. Sie können von Menschen jedes Alters verwendet werden.
6. Zugänglichkeit. Mit den beiliegenden Instruktionen und Empfehlungen kann die Prozeduren jedermann durchführen.
7. Die DENS-Therapie wird mit anderen Arten der Behandlung kombiniert (Pharmakotherapie, Physiotherapie, etc.).

DENS-THERAPIE HAT KEINE ALTERSGRENZEN:

- Zur Regulierung von gestörten Funktionen bei Erkrankungen des Bewegungsapparates, des Nervensystems, der Atmungsorgane, des Kreislaufsystems, der Verdauungsorgane, des endokrinen und Ausscheidungssystems, bei Erkrankungen der HNO-Organe, der Augen, der Haut;
- Zur Rehabilitation nach verschleppten Erkrankungen, chirurgischen Eingriffen, Verletzungen;
- Zur Vorbeugung von akuten Erkrankungen und Rückfälle chronischer Erkrankungen, einschließlich der Behandlung von in der präklinischen Phase nachgewiesenen Funktionsstörungen.

KONTRAINDIKATIONEN:

Absolut:

- implantierbarer Schrittmacher, individuelle Intoleranz des elektrischen Stroms

Relative:

- Epilepsie, Neubildungen, Fieber unklarer Genese, akute Thrombose, akute psychische, Alkohol- oder narkotische Erregung

Aufgrund der Technologie der dynamischen Elektroneurostimulation werden spezialisierte und universelle Geräte für Haus- und professionelle Physiotherapie geschaffen und hergestellt:

- **Spezialisierte Geräte (S. 6–11)** DENAS-Cardio, DENAS-Vertebra-02, DiaDENS-Cosmo wurden entwickelt, um bestimmte heilende Effekte zu erzielen: Korrektur des arteriellen Drucks, Behandlung und Vorbeugung von Nackenschmerzen, Behandlung von Rückenschmerzen, Realisierung von kosmetischen Verfahrensweisen
- **Universelle Geräte (S. 12–13)** DENAS-PCM werden zur Vorbeugung und Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten eingesetzt
- **externe Elektroden (S. 14-21)**
- **Gesundheitsprodukte (S. 22–23)**



Bei der Anwendung gibt es Kontraindikationen. Zur richtigen Durchführung der Anwendungen und zur Bestimmung der optimalen Kombination mit sonstigen Heilmethoden machen Sie sich bitte mit der Anleitung vertraut oder beraten Sie sich mit einem Spezialisten.



DENAS-Cardio

GERÄT FÜR ARTERIELLE DRUCKKORREKTUR

Verkaufshit



2 automatisierte
Behandlungsprogramme

Gefäßspezialist

Top 100 der besten
russischen Produkte




DENAS-Cardio – ist ein Gerät mit automatisierten Bluthochdruck-Behandlungsprogrammen. Das Gerät wirkt auf Bereiche von biologisch aktiven Punkten auf dem Unterarm (Programm 1) und Schienbein (Programm 2)

DENAS-Cardio ist einfach zu bedienen, die Prozessphasen werden auf dem Display angezeigt. Die durchschnittliche Dauer der Verfahrensweise beträgt 5-7 Minuten. Das Gerät dosiert die Wirkungsdauer individuell.

Bei regelmäßiger Anwendung von DENAS-Cardio nimmt der arterielle Druck allmählich ab und stabilisiert sich. Es verbessert das allgemeine Gefühl, was zu einer Verringerung der Medikamentenbelastung und der Prävention von hypertonen Krisen führt.


Schema der Anwendung des Gerätes

Programm 1

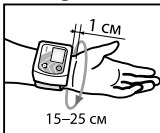

Wirkung auf den
Gefäßtonus

Programm 2

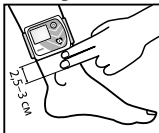

Auswirkungen auf
Wechselprozesse

UNIVERSELLE GERÄTE

Von der Basisversion zum professionellen Modell. Vom persönlichen Gesundheitsexperten zum multifunktionalen stationären Komplex. Sie sind sowohl für Familien, als auch Multi-Profil-Kliniken ausgewählt.



DENAS-Vertebra-02

GERÄT FÜR PRÄVENTION UND BEHANDLUNG DER
KRANKHEITEN VON WIRBELSÄULE UND INNEREN ORGANEN



Akzent auf jeden Wirbel

5 automatisierte
Behandlungsprogramme

Professionelle Möglichkeiten

Biologisch gesteuerte
Therapie

Top 100 der besten
russischen Produkte



DENAS-Vertebra-02 – ist ein Gerät fürs Wirken im Rücken- und Nackenbereich. Es gibt 5 Behandlungsprogramme. Die Wahl der Ebene des Wirkens (Nacken-, Brust- oder Kreuzbereich der Wirbelsäule, Zonen um die Wirbel) wird individuell bestimmt .

Programm A – Vorbeugung und Behandlung von Stress, Nervosität, Korrektur von Schlafstörungen, Erhöhung der Gesamtkörperwiderstand

Programm B – Schmerztherapie bei Erkrankungen und Verletzungen der Wirbelsäule, Rückenmuskulatur (bei körperlicher Überlastung).

Programm C – Therapie von chronischen Schmerzen, Muskelverspannungen, Korrektur von Funktionsstörungen bei Erkrankungen der inneren Organe (Verdauungs-, Kreislauf-, Geschlechts- und Ausscheidungssystem).

Programm D – Therapie von akuten Rücken- und Nackenschmerzen, Steigerung der Wirksamkeit anderer Programme.

Programm E – biologisch gesteuerte Therapie der akuten und chronischen Krankheiten, Funktionsteste, aufgrund deren Ergebnisse die Prozedur in der erforderlichen Zone durchgeführt wird .

UNIVERSELLE GERÄTE

Von der Basisversion zum professionellen Modell. Vom persönlichen Gesundheitsexperten zum multifunktionalen stationären Komplex. Sie sind sowohl für Familien, als auch Multi-Profil-Kliniken ausgewählt.



Triaktive Gesichtsmaske mit Hyaluronsäure dringt tief in die Struktur der Haut ein, hydratisiert und pflegt sie. Dank aktiver Wirkstoffe schützt es die Haut vor Trockenheit und Witterung, erhöht ihre Elastizität und ihr Lebenspotenzial.

Es funktioniert in drei Richtungen:

- reduziert die Menge an ersten Falten erheblich;
- verleiht der Haut ein glattes und porzellanartiges Aussehen;
- entfernt sofort Spuren von Müdigkeit und Stress.



DiaDENS-Cosmo

KOSMETISCHES GERÄT



Kosmetisches
Hautpflegegerät
Echte ästhetische
Wirkung

Das DiaDENS-Cosmo-Gerät wirkt auf die Haut, Blut- und Lymphgefäße, Talgdrüsen mit Schwachstrom (Mikrostromtherapie), womit es für eine starke ästhetische Wirkung sorgt.

Das Programm „Ernährung“

- Verbesserung der Mikrozirkulation,
- Verbesserung der Lebensfähigkeit der Zellen;
- regenerative und entzündungshemmende Wirkung;
- intensive Hydratation und Aufnahme von aktiven Maskenkomponenten;
- Regulierung der Talgdrüsenfunktion, Erneuerung der Schutzschicht der Haut.

Geignet für alle Hauttypen. Es dient zur expressiven Pflege für die Wiederherstellung der Haut nach einer negativen Auswirkung der Umwelt (UV, Wind, etc.), als Grundpflege für problematische Haut (vergrößerte Poren, Mischhauttyp, Zeichen der Hautalterung).

Das Programm „Lymphdrainage“

- signifikante Lifting-Wirkung,
- Korrektor des Gesichtsovals;
- Erhöhung der Stärke und Elastizität der Haut;
- Normalisierung des Muskeltonus;
- Vereinheitlichung der Hautfarbe.

Geignet für alle Hauttypen. Es empfiehlt sich für die regelmäßige Anwendung auf die Haut mit den Neigungen zu Schwellungen, als Grundpflege für die Haut mit den Zeichen der Hautalterung, als Rehabilitation nach plastischen Operationen.

Ergebnis der Verwendung von DiaDENS-Cosmo:


- Erhöhung der Elastizität;
- Verbesserung der Hautfarbe;
- Erneuerung des pH-Wertes der Haut.

UNIVERSELLE GERÄTE

Von der Basisversion zum professionellen Modell. Vom persönlichen Gesundheitsexperten zum multifunktionalen stationären Komplex. Sie sind sowohl für Familien, als auch Multi-Profil-Kliniken ausgewählt.



**Funktion
Kinderarzt**

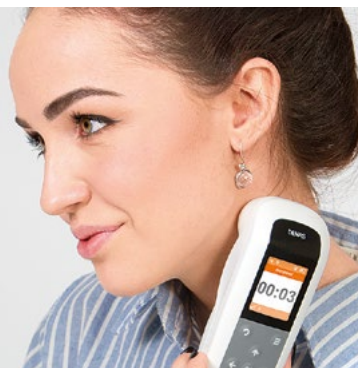

**VISUALISIERUNG
DER BEHANDELNDEN
ZONEN**

DENAS-PCM

UNIVERSALGERÄT FÜR DIE DENS-THERAPIE



Für die ganze Familie

24 automatisierte
Programme

Funktion „Kinderarzt“

Mehrsprachig

DENAS-PCM ist ein tragbares Physiotherapiegerät zur Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten bei Erwachsenen und Kindern.

Erweiterte Behandlungsmöglichkeiten mit Visualisierung von behandelnden Zonen auf dem Farbdisplay.

The „Programmes“ menu

24 Behandlungsprogramme für die Behandlung von häufigen Krankheiten und Zuständen.

In automatisierten Programmen ist eine Kombination von Behandlungsfrequenzen bereits vorbestimmt und Informationen werden immer auf dem Display angezeigt, wo es notwendig ist, das Gerät anzubringen.

Menü „Frequenzen“

Optionale Wahl der Behandlungsfrequenz im Bereich von 1 bis 200 Hz für individuelle Prozeduren unter Berücksichtigung der Diagnose.

Frequencies from 1 to 9.9 Hz – Infra-low frequencies are used to construct an individual procedure taking the diagnosis into account.

Frequenzen von 1 bis 9,9 Hz – infraniedrige Frequenzen werden für die Zusammenstellung der individuellen Prozeduren unter Berücksichtigung der Diagnose genutzt.

Frequenzen 10, 20 Hz – Korrektur von psychischen emotionalen Zuständen und hormonellen Störungen.

Frequenzen 60, 77, 125, 140 Hz – Universalfrequenz gegen Schmerzen, Schwellungen und Entzündungen.
Frequenzen 200 Hz – schnelle Entfernung von Schmerzen bei akuten Verletzungen

77AM – modulierte Frequenz mit tonischen Effekten, erlaubt, chronisches Erschöpfungssyndrom zu überwinden, die Stärke wiederherzustellen und die Ar-

beitsfähigkeit zu erhöhen.

7710 – modulierte Frequenz mit einer entspannenden Wirkung, die sich in der Korrektur des arteriellen Drucks, der Stressbehandlung und seiner Folgen auszeichnet, sie ist für alle Schemen für die Schmerzlinderung geeignet.

7720 – modulierte Frequenz gegen Schwellungen und für die Schmerzlinderung. Es wird verwendet, um Schmerzen zu behandeln und den Blutkreislauf wiederherzustellen.

MED (minimale effektive Dosis) – Programm für die Wirkung auf biologische aktive Punkte. Es wird für die Rehabilitation nach körperlicher und geistiger Überlastung, Krankheitsprävention verwendet.

Screening – dieses Sonderregime hilft problematische Zonen zu finden und nächste Zone für die Anwendung zu bestimmen.

Kinderarzt – Möglichkeit zur Bestimmung der optimalen Möglichkeit und Dauer der Verfahrensweise, eine Vielzahl von Programmen für Verfahrensweisen bei kleinen Kindern

Die Tragbarkeit und Multifunktionalität des DENAS-PCM-Physiotherapiegerätes ist mit der verfügbaren Anwendung und einem maximalen Komfort zum gewünschten Zeitpunkt und am gewünschten Ort verbunden.

An DENAS-PCM werden externe Elektroden DENAS-Brillen, DENAS-Applikatoren, DENAS-Massage und DENAS-Reflexo angeschlossen, was die Durchführung von Verfahrensweisen wesentlich erleichtert und die Schwierigkeit verringert.



Auf den Fußsohlen gibt es eine größere Menge der biologisch aktiven Punkte, die eine funktionelle Verbindung mit allen Systemen unseres Körpers haben. Wenn wir mit schwachen Stromimpulsen auf die Fußzonen wirken, können wir bei verschiedenen Krankheiten eine heilende Wirkung erzielen.

DENAS-Reflexo

EXTERNE THERAPEUTISCHES GERÄT FÜR
FUSSSOHLEN ZUM DENAS-PCM-GERÄT

NEUHEIT

Elektrostimulation
der Fußzonen

Hypoallergenes
Material



Orthopädische Fußkrankheiten (flache Beine, Valgus-Fehlstellung des Beines - Knochen oder Konus am Daumen, Folgen von Verletzungen)

Die Gesundheit aller Gelenke des Beins, der Wirbelsäule und der Zustand aller inneren Organe hängt von der Dämpfungsfunktion des menschlichen Fußes ab.

Arthrose und Arthritis Es hilft Schmerzen in den Gelenken zu lindern, sich von Verletzungen zu erholen (Prellungen, Dehnungen, Frakturen im Bereich des Fußes und des Schienbeins). Es wird als Prävention für diejenigen empfohlen, deren Arbeit mit statischen Lasten verbunden ist.

Männliche und weibliche Krankheiten

Es stellt die Gesundheit nach verschleppten entzündlichen Erkrankungen der kleinen Beckenorgane wieder her, hilft bei der Unterbrechung des Harnens bei Männern und Frauen im höheren Alter.

Krampfadern, arterielle Krankheiten der unteren Extremitäten (Atherosklerose, Diabetes)

Es hilft bei der Verbesserung der venösen Blutzirkulation in Krampfadern und bei der Aufrechterhaltung des arteriellen Blutkreislaufs bei Krampfadern und Diabetes.

Krankheiten des peripheren Nervensystems

Es hilft, die gestörte Empfindlichkeit wiederherzustellen, Schmerzen bei Polyneuropathie zu reduzieren. Die Elektrode hat eine spezielle Form in Form eines Teppichs, der mit abgerundeten Dornen bedeckt ist

und ermöglicht:

- die Funktion der Elektrostimulation mit den Massagewirkungen an die Fußsohlen zu verbinden;
- Verwendung der Elektrode durch Personen mit unterschiedlichen Größen der Fußsohle, da die Form der Elektrode die anatomische Struktur der Fußsohle berücksichtigt;
- auf den Teppich können die Fußsohlen sowohl Erwachsene, als auch Kinder stellen, und zwar so, dass sie fest auf der Arbeitsfläche stehen.

Für wen DENAS-Reflexo gedacht ist

- Für aktive Menschen mit wenig Freizeit - dies ist ein schneller Weg, um Müdigkeit, die ersten Symptome von Gelenk- oder Gefäßerkrankungen, Fußschwellung am Ende des Arbeitstages zu verhindern und zu behandeln, für Erholung nach einem Arbeitstag, den man auf den Füßen verbracht hat.
- Für Menschen mit eingeschränktem Bewegungsumfang ist es eine Möglichkeit der komfortablen Behandlung von Gelenken und Gefäßen.
- Für Kinder ab 2 Jahren: Es wird oft als Genesung bei oft kranken Kindern empfohlen.
- Auch für Kinder mit orthopädischen Fußstörungen - 3-4 Prozeduren pro Jahr

EXTERNE ELEKTRODEN

Zusätzliche Möglichkeiten zum komfortablen Einwirken auf verschiedene Körperstellen, zur Selbsthilfe und zur Verkürzung der Verfahrensweise.



DENAS-Massage

SET DER EXTERNEN MASSAGEELEKTRODEN ZUM
DENAS-PCM-GERÄT




Bewahrung
jugendlicher Haut

Auswirkungen auf den
Haaransatz des Kopfes

Scalptherapie

Die flache Massageelektrode (1) wurde entwickelt, um kosmetische Verfahrensweisen im Gesicht und am Körper durchzuführen, um einzelne Zonen mit schmerzhaften Symptomen zu behandeln. Es wird bei verringerter Elastizität und verringertem Muskeltonus, für die Entfernung und Prävention von Cellulitis, für die Wirkung auf einzelne schmerzhaft Zonen verwendet.

Die Nadel-Massageelektrode (2) ist fürs Wirken auf den Haaransatz bestimmt. Die Elektrode wird zur Behandlung von Kopfschmerzen und Leber-egeln, Schlafstörungen und erhöhter Erschöpfung, Angst, Behandlung und Vorbeugung von Haarausfall, Rehabilitation nach entzündlichen Erkrankungen, bei kraniozerebralen Verletzungen und zerebrovaskulärer Atherosklerose eingesetzt.

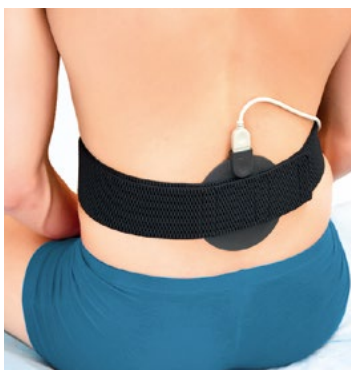

DENAS-Applikator

SET DER EXTERNEN ZONELEKTRODEN ZUM DENAS-PCM-GERÄT



Komfortables Wirken auf den Rücken- und Gelenkbereich
Hypoallergenes Material

Der **DENAS-Applikator** besteht aus einem hypoallergenen elastischen Material mit leitfähigem Füllmaterial und wird als Alternative zur eingebauten Elektrode des DENAS-PCM-Geräts verwendet.

Der **DENAS-Applikator** wird einfach und zuverlässig mit einer Klettmanschette an verschiedenen Körperteilen, Gliedmaßen und Gelenken befestigt.

Das Set enthält 3 Elektroden in verschiedenen Formen.

Die erste (1) kann verwendet werden, um auf große Körperoberflächen (zum Beispiel auf dem Rücken) zu wirken

Second (2) electrode is well suited for placing on the limbs.

Der dritte (3) Applikator ist in Form eines Hufeisens hergestellt. Es kann in einen Konus zusammengerollt, mit speziellen Fixationshilfen fixiert und dann beispielsweise auf das Knie, den Ellenbogen oder die Schulter gelegt werden.

Während der Verfahrensweise kann der Patient liegen oder in einer bequemen Position sitzen, die den vollen Kontakt der Elektrode mit der Haut sichert. So kann die ganze Verfahrensweise selbstständig, ohne fremde Hilfe durchgeführt werden.



DENAS-Brillen

THERAPEUTISCHE PARAORBITALE
FERNELEKTRODE ZUM DENAS-PCM-GERÄT

Prävention und Behandlung
von Sehstörungen bei
Erwachsenen und Kindern

Komfortable Verwendung
in der Arbeit oder zu Hause

Hypoallergenes Material



Die **DENAS-Brillen** bestehen aus hypoallergenem elastischen Material mit leitfähiger Füllung. Die glasförmige Elektrode wird als Alternative zur eingebauten Elektrode des DENAS-PCM-Geräts verwendet und ermöglicht die Einwirkung auf die biologisch aktive Zone um die Augen herum.

Die DENAS-Brillen werden für die Reduktion der Ermüdung der Augen, als Prävention und zur Behandlung von Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit, Glaukom, entzündlichen Augenerkrankungen und Netzhautdystrophie, Optikus-Atrophie, für Rehabilitation nach der Operation genutzt.



DENAS-OLM-01

HEILDECKE

Beseitigung der Folgen
von Stress

Normalisierung des Schlafes

Verbesserung des
Gesamtzustandes




DENAS-OLM-01 – therapeutische Umschläge, Schutz gegen äußere elektromagnetische Belastungen. Komplette Umschläge mit der Heildecke werden zur Genesung, zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten, einschließlich chronischer stressbedingter Erkrankungen, verwendet. Sie sichert eine Verbesserung des

Schlafs, des Gesamtzustandes und der Laune, eine Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen Stressfaktoren. Die Verwendung von DENAS-OLM in Kombination mit dynamischen Elektronenstimulationsprozeduren multipliziert Effekte und verkürzt die Behandlungszeit.

PRODUKTE FÜR GESUNDHEIT

Ein moderner Mensch ist Stress und Angst ausgesetzt, was natürlich sein psychischer und physischer Zustand widerspiegelt. Wir bieten Produkte, die in der Lage sind, die negativen Auswirkungen der Umwelt zu reduzieren und Ihre natürliche Schönheit und Gesundheit zu mobilisieren.

Gesunder Rücken – jede Bewegung aus Freude!

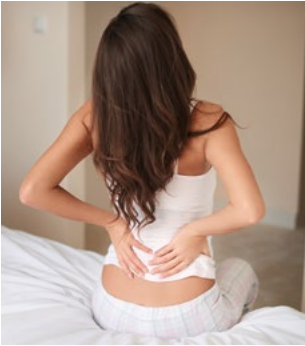

DENAS für den gesunden Rücken

Zu empfehlen: für jeden, der regelmäßig oder ständig unter Rückenschmerzen leidet, die mit Wirbelsäulenerkrankungen in Verbindung gebracht werden, für Menschen, deren Arbeit mit körperlicher Belastung oder Zwangsarbeit verbunden ist, und für alle Liebhaber des Gärtnerns.

DENAS-PCM
siehe S. 12-13



DENAS-Applikator
siehe S. 18-19

I. Akute Rückenschmerzen (Verschlimmerung, Trauma)

Das Programm „Starke Schmerzen“, dann das Programm „Schmerzen“ oder das Programm „Trauma“, Leistung - komfortabel. Es wird empfohlen in direktem Anschluss an Schmerzen links und rechts der Wirbelsäule durchzuführen. Wenn der Schmerz abklingt, führen Sie die Verfahrensweise gemäß dem Programm «Chronische Schmerzen» durch. Die durchschnittliche Länge der Verfahrensweise - von 30 Minuten oder mehr bis zur Schmerzlinderung (durchschnittlich 60 Minuten). Die Programme können gewechselt werden. Während des Tages kann man die Prozedur mehrmals wiederholen.

II. Chronische Rückenschmerzen

Das Programm „Rücken“ und das Programm „Schmerzen“, Leistung – minimal oder komfortabel.

Es wird empfohlen, es in direktem Anschluss an Schmerzen links und rechts der Wirbelsäule durchzuführen. Die Dauer der Verfahrensweise – von 30 bis 60 Minuten. Die Programme können gewechselt werden. Während des Tages führen Sie die Verfahrensweise 1-2x durch.

III. Vorbeugung von Rückenschmerzen

Das Programm „Muskeln“, Leistung – minimal oder komfortabel. Es wird empfohlen in direktem Anschluss an Muskelüberspannung durchzuführen -Überarbeitung, links und rechts der Wirbelsäule. Die Dauer der Verfahrensweise von 15 bis 30 Minuten. Die Verfahrensweise werden nach Bedarf durchgeführt, mit Beschwerden im Rückenbereich.

Die Prozeduren werden liegend oder halbsitzend in der bequemsten Position durchgeführt.

Schauen Sie sich die Welt ohne Spannung an!



DENAS für Entlastung der Augen

Zu empfehlen: für Schüler, Studenten, am Computer Arbeitende, Fahrer, Menschen, deren Berufe mit der Augenbelastung in Verbindung stehen.

DENAS-PCM
siehe S. 12-13



DENAS-Brillen
siehe S. 20-21

Frequenz (Menü „Frequenz“) – 7710, Stärke für die Augenzone - 2-5 konventionelle Einheiten. Dauer - 15 Minuten, 1-2mal am Tag (wünschenswert am Abend oder unmittelbar nach der Augenbelastung).

Kein Stress in Ihrem Leben!



Set DENAS ANTISTRESS

Zu empfehlen: für Erwachsene und Kinder mit Schlafstörungen, alle in einer stressigen Umgebung, mit höheren physischen und psychischen emotionalen Belastungen.

DENAS-OLM-01
siehe S. 22-23



DENAS-PCM
siehe S. 12-13

I. DENAS-OLM-01

Abendumschläge. Durchschnittliche Dauer – 30 Minuten. Wenn man dabei einschläft, ist es nicht nötig, den Schlaf zu unterbrechen und die Decke zu entfernen.

II. DENAS-PCM

Das Programm MED auf den biologisch aktiven Punkt Hegu (zwischen Daumen und Zeigefinger) von links und rechts (siehe Abbildung 1). Die Dauer wird individuell vom Programm bestimmt (Durchschnitt 5-6 Minuten pro Punkt). Führen Sie einmal pro Tag im Rahmen der Prävention, 3-4x pro Tag in einem verschlechterten Zustand aufgrund einer stressigen Umgebung (Kopfschmerzen, verminderte Arbeitsfähigkeit).



Abb. 1



*Weitere Informationen über
die DENS-Therapie und die
Produkte der Gesellschaft:*

Bei Ihrem autorisierten Händler